

Medtronic

Ingeniería para lo extraordinario

Acceda al sitio quirúrgico y protege la herida.

Protector de heridas SurgiSleeve™
con anillo de retracción*

*(Tamaños grandes y extragrandes)



Detalles del producto



Anillo de Retracción

Proporciona retracción circunferencial y visibilidad en comparación con un protector de heridas con anillo flexible en los tamaños grande y extra grande¹.

Anillo Proximal Azul

Se ajusta a diferentes espesores de la pared abdominal.

Película transparente resistente

Visibilidad y resistencia.

Anillo distal gris flexible

Se inserta y se retira fácilmente a través de la incisión.





Muecas /abertura para los dedos

Facilitan la inserción y remoción del anillo de retracción opcional.

Exposición y protección del sitio quirúrgico


Mayor área de retracción de la incisión: Hasta un 9% en el tamaño extra grande y hasta un 17% en el tamaño grande.¹

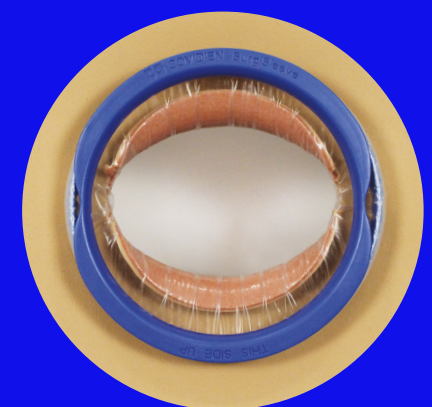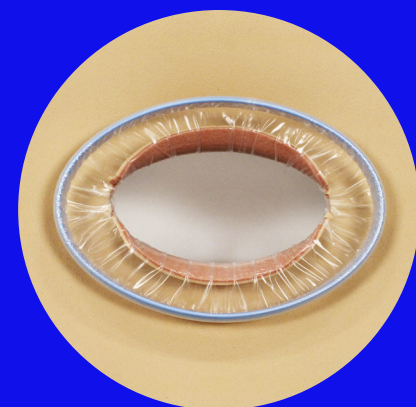

El anillo de retracción circunferencial aumenta el área de trabajo para una mejor exposición y visualización.

Tamaños del protector de heridas SurgiSleeve™
y códigos para pedidos:

Código	Tamaño	Tamaño de la incisión	Cant. caja
WPXSM24	Extra Pequeño	2 - 4 cm	5
WPSM256	Pequeño	2,5 - 6 cm	5
WPMD509	Mediano	5 - 9 cm	5
WPLGR914	Grande con anillo de retracción	9 - 14 cm	5
WPXLGR1117	Extra grande con anillo de retracción	11 - 17 cm	5

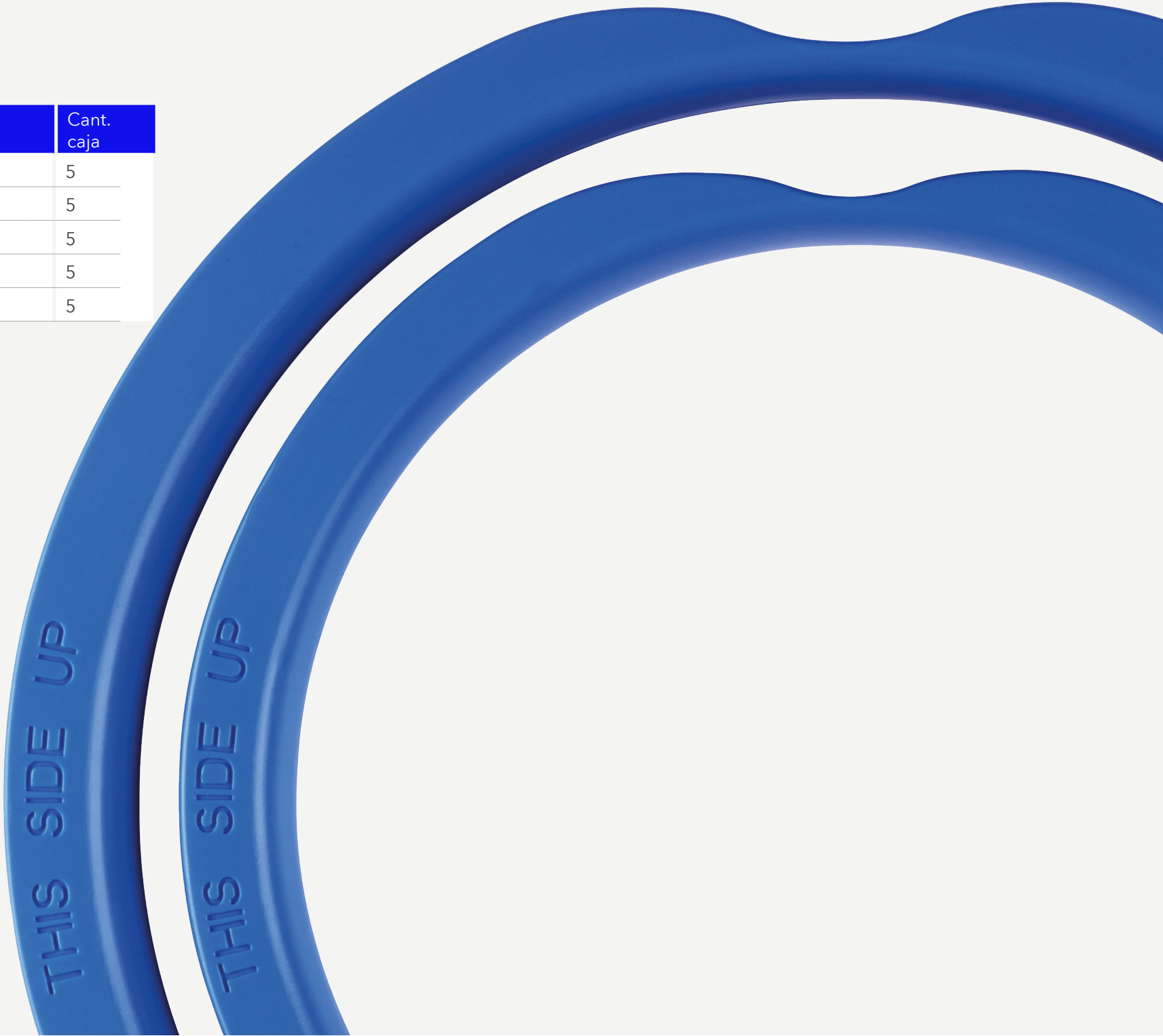

IMPORTANTE: Consulte el manual del producto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

© 2023 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.

1. Para los tamaños grande y extra-grande, según el informe interno #2151-020, comparación de la retracción de incisión con el protector de heridas SurgiSleeve™ grande con y sin anillo de retracción, 14 de octubre de 2014, e informe interno #2151-022, comparación de la retracción de incisión con el protector de heridas SurgiSleeve™ extra-grande con y sin anillo de retracción, 4 de noviembre de 2014.